

چگونه می توان تست آنتی ژن سریع (RAT) در بینی را انجام داد



خواندن نتیجه تست



'C': کنترل: خطی که این جا هست نشان می دهد که تست کار می کند.
'T': تست: بدون خط = منفی ، یک خط در این جا = مثبت.



منفی

احتمال این که کووید داشته باشید نیست. اگر اعلامی دارید روز بعد تست RAT را تکرار کنید یا برای انجام تست PCR بروید



باطل

یک تست دیگر انجام دهید (و مراحل ۲ تا ۹ را تکرار کنید). مشکل دارید؟ تست PCR انجام دهید




مثبت

شما مصاب به کووید شده اید. اگر نتیجه تست در 'T' خط ظاهر می شود ، حتی اگر خیلی کم رنگ، این یک نتیجه مثبت است.

اگر نتیجه شما مثبت است، عاجل خود را منزوی کنید و به اداره صحت عامه اطلاع دهید.

این کد را اسکن کنید تا نتیجه تست مثبت خود را آنلاین اعلام کنید یا با خط تلفون صحت عامه نمبر ۱۸۰۰۶۷۱۷۳۸ تماس بگیرید.

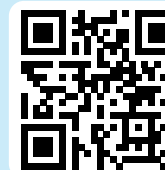

انواع مختلفی از بسته های RAT موجود است. حتماً از راهنمائی هائی که داخل بسته است پیروی کنید. در این جا چند راهنمائی کلی وجود دارد که باید دنبال کنید:

۱. قبل از شروع، راهنمائی هائی را که همراه با تست آمده، با دقت بخوانید. بعضی از دستورالعمل های تست یک QR دارند که می توانید آنرا برای تماشای ویدئو اسکن کنید.




۲. دستان خود را شسته کنید.




۳. بسته را باز کنید.



۴. گاله پنبه ای را دور دیواره داخل بینی به عمق ۲ سانتی متر با حرکت دایره ای پاک کنید. ۵ دفعه یا ۱۵ ثانیه در هر سوراخ بینی

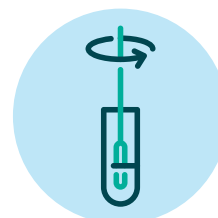

۵. گاله پنبه ای را داخل لوله محلول بگذارید. خوب مخلوط کنید. امکان دارد که ضرور باشد پنبه را فشار دهید یا چوب را جدا کنید. دستورالعمل تست خود را بخوانید.

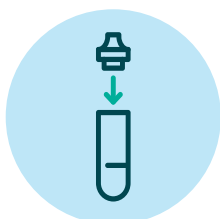


۶. درب لوله را بسته کنید.



۷. قطره ها را در پنجره نمونه تست قرار دهید. راهنمای تست به شما خواهد گفت چند قطره بگذارید. بسته تست را حرکت ندهید یا بلند نکنید.



۸. زمان سنج را شروع کنید. طبق راهنمائی بسته تست، منتظر زمان دقیق باشید. پنجره نمونه تست را حرکت ندهید و بلند نکنید.

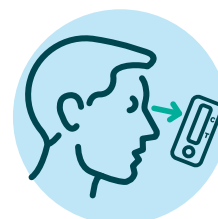

۹. نتیجه تست را بخوانید. (به سمت راست این صفحه رجوع کنید)